

SANITAS



SBC 53

ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
SANITAS SBC 53	
GUT	88,82 %
Handgelenk-Blutdruckmessgerät im Onlinetest www.etm-testmagazin.de	
	11/2016

SBC 53 Bluetooth® Blutdruckmessgerät

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk

Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Blutdruckmessgerät via *Bluetooth*® low energy technology

Monitoring der Messergebnisse über „HealthCoach“ App / Web / PC

Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala

Arrhythmie-Erkennung: Warnt vor evtl. Herzrhythmusstörungen

Mit Manschette für Handgelenkumfänge von 14,0-19,5 cm

Übersichtliches, gut ablesbares Display

Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte

Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage

Datum und Uhrzeit

Abschaltautomatik

Meldung bei Anwendungsfehlern

Automatische Druckvorwahl und Luftablass

Batteriewechselanzeige

Inkl. 2x 1,5V AAA Batterien und praktischer Aufbewahrungsbox

Medizinprodukt

Produktmaße (LxBxH): 78 x 63 x 23 mm

Produktgewicht: ca. 96 g (mit Manschette, ohne Batterien)

2 Jahre Garantie

VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4

EAN-Nr.: 4211125 65607 2

Art.-Nr.: 656.07

SBC 53 Bluetooth® Blood pressure monitor

Fully automatic blood pressure and pulse measurement on the wrist

Innovative networking between smartphone and blood pressure monitor via *Bluetooth*® low energy technology

Measurements can be monitored using "HealthCoach" app / Internet / PC

Risk indicator: Classification of measurements with coloured scale

Arrhythmia detection: Warning in case of possible heart rhythm disturbance

With cuff for wrist circumferences from 14.0-19.5 cm

Clear, easy-to-read display

Two user memories for 60 measured values each

Average value of last stored measurements and morning and evening blood pressure for the last 7 days

Date and time

Automatic switch off

Signal in case of application errors

Automatic pressure preselection and deflation

Battery changing indicator

Incl. 2x 1.5V AAA batteries and practical storage box

Medical device

Product measurements (LxWxH): 78 x 63 x 23 mm

Product weight: approx. 96 g (with cuff, without batteries)

2 year guarantee

Sales unit: 4 / Shipping carton: 4 x 4





EAN no.: 4211125 65607 2


Item no.: 656.07



4 Schritte zu Ihrer Verbindung / 4 steps to get connected:

4 Schritte zu Ihrer Verbindung / 4 steps to get connected

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <p>1
Check compatibility</p>  | <p>DE Liste der unterstützten Geräte
EN List of supported devices</p> | <p>3
Take measurement</p>  | <p>DE Ermittlung von Blutdruck und Puls
EN Blood pressure and pulse are calculated</p> |
| <p>2
Download App</p>  | <p>DE Komfortable Auswertung über HealthCoach App
EN Convenient evaluation using HealthCoach App</p> | <p>4
Transfer measurements</p>  | <p>DE Automatische Übertragung durch Bluetooth® low energy technology
EN Automatic transfer via Bluetooth® low energy technology</p> |

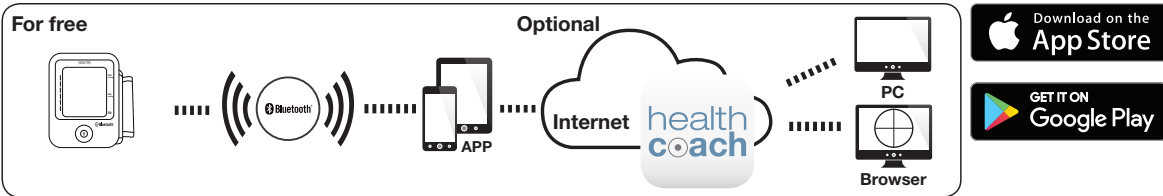

Kinderleichte Inbetriebnahme / Easy set-up

- | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| <p>1a</p>  | <p>DE Batterien einlegen (2xAAA, 1,5V).
EN Insert batteries (2 x AAA, 1.5 V).</p> | <p>1b</p>  | <p>DE Bluetooth® im Einstellungs-menü des Blutdruckmessgerätes aktivieren.
EN Activate Bluetooth® in the settings menu of the blood pressure monitor.</p> | <p>2</p>  | <p>DE Bluetooth® in den Einstellungen des Smartphones aktivieren.
EN Activate Bluetooth® in the smartphone settings.</p> |
| <p>3</p>  | <p>DE „HealthCoach“ aus dem App Store installieren.
EN Install „HealthCoach“ from the App Store.</p> | <p>4</p>  | <p>DE App starten und den Anweisungen folgen.
EN Start the app and follow the instructions.</p> | <p>5</p>  | <p>DE SBC 53 in App auswählen.
EN Select SBC 53 in the app.</p> |
| <p>6</p>  | <p>DE Messung durchführen und Benutzerspeicher mit START/STOP  bestätigen (App muss für die Übertragung geöffnet sein).
EN Perform measurement and confirm the user memory by pressing the START/STOP button  (app must be open for transfer).</p> | | | | |

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hans Disnlag GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.